



Mini Blade^{XT}

Erlebe Abenteuer
mit Mini BladeXT!

Blatchford 



“Ich kann stehen, ich kann gehen, ich kann Trampolin springen und vieles mehr! Ich liebe die strahlende Farbe. Meine Mini BladeXTs sind ein vielseitiges Gesamtpaket!”

Izzy

Mitmachen und Spaß haben!

Mit der Jugend fängt das Leben erst richtig an.

Ein aktiver Lebensstil sollte so ausgestattet sein, um den Bedürfnissen dieser anspruchsvollen Anwendergruppe möglichst gerecht zu werden – ob es in die Schule geht, Zeit mit Freunden verbracht wird, beim Laufen, Radfahren oder bei anderen Aktivitäten.

Entwickelt als Komplettlösung bietet der Mini BladeXT sehr gute Stabilität, Bodenhaftung und hohen Laufkomfort durch die gesplittete Vorfußfeder und eine griffige Sohlenkonstruktion. Dank der speziellen C-Faser Karbonlagenform bietet der Fuß eine besonders hohe Energieausbeute bei allen Geschwindigkeiten.

Erhältlich in Dazzling Pink oder Electric Blue ist der Mini BladeXT die ideale Wahl für Kinder für den aktiven Part des Alltags!





Optimale Energie-Effizienz

Gleich vom ersten Bodenkontakt an trägt der Karbonfuß wie eine Belastungsfeder aktiv zur Vorwärtsbewegung bei. Der C-förmig geteilte Vorfuß mit verbesserter Standsicherheit gleicht ein geringes Gewicht mit exakter Federreaktion bei allen Geschwindigkeiten aus.

Schutz und Stabilität

Aufgrund des einzigartigen Fußdesigns fühlen sich Anwender ausgewogen und sicher beim Stehen, Laufen oder Richtungswechsel. Die stoßdämpfenden Eigenschaften sorgen für hohen Laufkomfort und Schutz der gesamten Gelenkkette bei jedem Schritt.

Sicherheit und Compliance

Bei allen Aktivitäten sorgt die integrierte Basisfederplatte für Trittsicherheit. Die geteilte Vorfußfeder verbessert die Compliance zum Boden, bietet Flexibilität und ermöglicht hohen Laufkomfort, auch auf unebenen Untergründen.

Farbenfrohe Designlackierung

Erhältlich in Dazzling Pink und Electric Blue – das macht den Mini BladeXT attraktiv und jungen Anwendern Spaß und Vergnügen.

Wasserfest

War es irgendwo schlammig? Den Mini BladeXT im Anschluss ganz einfach mit klarem Wasser abspülen und vom Schmutz, Salz- oder Chlorwasser befreien.

Leichtgewichtig und robust

Die besonders leichte Konstruktion bremst nicht aus! Hergestellt aus E-Carbon ist der Mini BladeXT besonders robust, aber dennoch flexibel und reaktionsschnell.





“Ich fühle mich einfach sicherer. Ich kann schneller laufen und mehr Sport gemeinsam mit meinen Brüdern treiben!”

Cody



Natürliche Bewegung

Sobald der Anwender das Gewicht auf den Mini BladeXT überträgt, komprimiert die Fersenfeder. Stoßbelastungen werden absorbiert für einen hohen Laufkomfort und frühzeitige Stabilität. Die Konstruktion sorgt für eine reibungslose Überrollphase und nahtloses Laden der e-Carbon Zehenfeder. Dann wird die gespeicherte Energie für den Vorwärtstrieb freigegeben um in den nächsten Schritt zu springen. Das Ergebnis ist eine ausgewogene, symmetrische und energieeffiziente Fortbewegung.

Features

- Kombination aus Vorfuß- und Fersenfeder
- Gesplittetes Federdesign
- Traktionssohle
- Fersenkeil für individuelle Steifigkeit des Ferstenauftritts
- Wasserfest
- Austauschbares Fersenfeder-Kit
- 30 mm Mini Pyramidenadaption drehbar verschiebbar



Und für die großen Kinder...

Der Spaß hört nicht auf, denn man kann mit dem Mini BladeXT auch erwachsen werden. Der BladeXT ist der nächste Schritt der Etappe: erhältlich in 9 Federstärken und geeignet für Anwender bis 166 kg.



Montage

Die Karbonfedern für den Mini BladeXT sind in Soft, Medium und Fest erhältlich und für Anwender bis zu 60 kg einsetzbar. Die dreh-/verschiebbare A/P Pyramidenadaption erlaubt eine anwenderspezifische Anpassung und Einstellung. Ein Fersenkeil kann bei Bedarf zusätzlich eingesetzt werden, falls eine individuelle Steifigkeit des Fersenauftritts gewünscht ist. Erhältlich mit einer 25 mm oder 30 mm Mini-Pyramidenadaption kann der Mini BladeXT für das jeweilig gewählte System Einsatz finden.

Produktspezifikation

Anwendergewicht:	20-60kg
Amputationshöhe:	US, KE, OS, HE
Mobilitätsklasse:	3-4
Federkategorien:	1-3
Produktgewicht:	450 g (inkl. Mini Pyramidenadapter)
Bauhöhe:	168mm
Farboption:	Dazzling Pink (P) oder Electric Blue (B)



Zum Eintauchen in Wasser geeignet

Bestellbeispiel

Product Code	Farbe	Federset	
MBXTA	B	3	SM

Fußbeispiel: Mini BladeXT, Farbe Blau, Federset 3

Aktivität	Körpergewicht			
	20-35	36-50	51-60	kg
	44-77	78-110	111-132	lbs
3-4	1	2	3	Set für Vorfußbund Fersenfeder
	Soft	Medium	Hart	

Adapter

Mini Pyramidenadapter (im Lieferumfang enthalten): 189627

Mini Pyramidenaufnahme 25 mm
Rohraufnahme: 189526




Mini Pyramidenaufnahme 30 mm
Rohraufnahme: 189727



Austauschset Fersenfeder inkl. Laufsohle

- 1 Soft – 539084SS
- 2 Medium – 539084MS
- 3 Hart – 539084FS

Bauhöhe

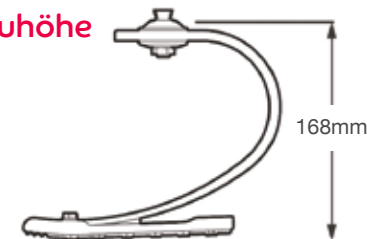



Es wird eine jährliche Sichtprüfung empfohlen. Überprüfen Sie optische Mängel, die eine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bevor Sie neue Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Orthopädietechniker, ob ein spezielles Training erforderlich ist.

+49 9221 87808-0 | info@blatchford.de

Blatchford Europe GmbH, Fritz-Hornschuch-Str. 9,
95326 Kulmbach, Germany.

[@blatchfordDE](https://www.blatchford.de) | [blatchford.de](https://www.blatchford.de)

203266360DE Iss1 09/19. Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Blatchford